




Эксплуатация и управление

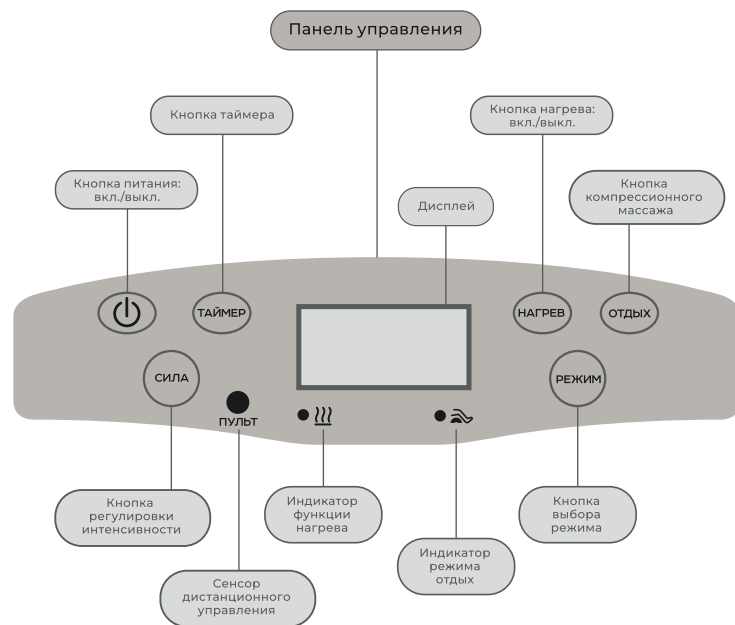

Пульт управления:

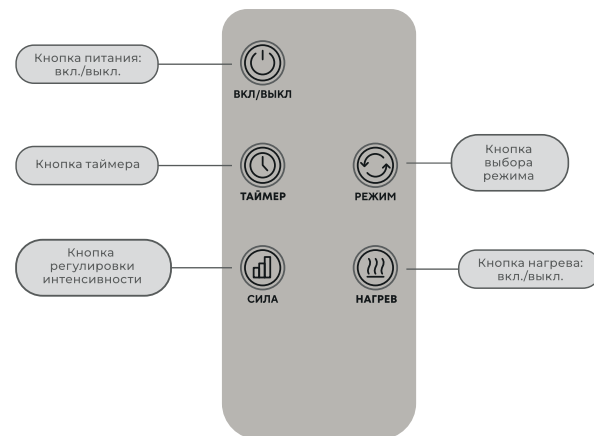

- Нажмите кнопку питания коротким нажатием.
- Нажмите кнопку для установки таймера и выберите подходящий для Вас сеанс массажа 5/10/15/20/25/30 минут.
- Коротким нажатием на кнопку регуляции интенсивности выберите 1 из 5 уровней силы массажа.
- Кнопка функции нагрева позволяет включить или выключить нагрев ног.
- В режиме "отдых" массажер работает только компрессионными подушками.
- Кнопка выбора режима позволит выбрать 1 из 4 предустановленных режимов массажа.

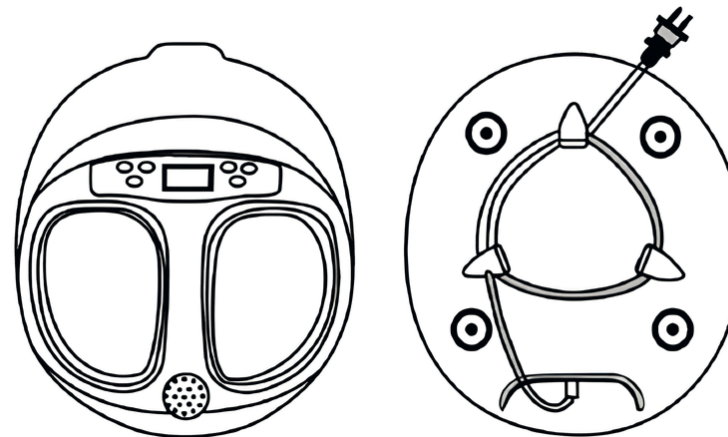

На основании массажера находятся крючки для шнура, они предназначены для аккуратного и безопасного хранения устройства



Массажер для ног, с пультом ДУ,
цвет коричневый

Оазис



Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare.

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей.

Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Массажер для ног Оазис с пультом ДУ - многофункциональный гаджет, который поможет восстановить силы и облегчить боль в ногах. Работа устройства основана на техниках шиацу и гуаша. Массажные ролики и валики разработаны с учетом анатомии топ, а аэро-подушечки усиливают воздействие на биологически активные точки. Функция нагрева подарит дополнительное расслабление.

Настройте массажер под свои предпочтения и наслаждайтесь !

Технические характеристики

Автоматическое отключение: 5/10/15/20/25/30 минут

Номинальное напряжение: AC110-250V; DC12V/50-60H

Питание: от сети

Мощность, Вт: 40

Управление: на панели, с помощью пульта ДУ

Вес брутто, кг: 4,5

- Меры предосторожности**
1. Обязательно внимательно прочтите инструкцию перед использованием, чтобы обеспечить безопасность и надлежащее использование изделия.
 2. Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
 3. Не рекомендуется использовать массажер после операций в области ног, стоп, не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.
 4. Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
 5. Этот продукт не может быть использован для самодиагностики или лечения, и, пожалуйста, обратитесь за профессиональной медицинской помощью, если вы нуждаетесь в диагностике или лечении.
 6. Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
 7. Не используйте массажер во время сна.
 8. Используйте массажер только в сухих помещениях.
 9. Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений.
 10. Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!

11. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
12. Дети, лица с физическими и психическими расстройствами должны находиться под наблюдением при использовании продукта.
13. Не используйте этот продукт при комнатной температуре выше 40 °C.
Не используйте изделие на открытом воздухе;
14. Не используйте изделие рядом с электронагревателем или плитам, а также под прямыми солнечными лучами

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если Вы:

- Получаете медицинскую помощь или испытываете физический дискомфорт;
- у Вас гипертония, болезнь сердца, церебральный атеросклероз и церебральный тромбоз, онкологические заболевания, остеопороз;
- Беременны;
- Используете кардиостимулятор или имплантируемые медицинских устройства.

- Хранение и уход за массажером**
1. Перед проведением действий по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
 2. Не перекручивайте кнопку включения и шнур питания.
 3. Используйте сухую ткань для очистки поверхности изделия.
 4. Не подвешивайте изделие за шнур.
 5. Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.
 6. Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства.



Артикул CC-001OK

