

МУЛЬТИГОЛОВЫЙ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР

GALAXY 6 HEADS



Благодарим Вас за приобретение продукции CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Мультиголовый перкуссионный массажер CleverCare Galaxy 6 heads со сменными головками и ремнем для режима «свободных рук» создан для глубокой перкуссионной терапии мышц всего тела. С 6 массажными головками и ремнём этот массажер обеспечит интенсивный и эффективный массаж, позволяя освободиться от напряжения и стресса, улучшить кровообращение и общее состояние мягкий тканей тела и укрепить мышцы.


Технические характеристики

- Тип массажера: перкуссионный, вибрационный
- Автоматическое отключение: 15 минут
- Продолжительность заряда продукта: около 3 часов
- Аккумулятор: 1500 MAh
- Номинальное напряжение: 7.4 V, 2 A
- Мощность: 30 Вт
- Вес массажера без насадок: 972 г

Комплектация

- Массажер
- 18 сменных насадок
- Ремень для режима «свободные руки»
- Инструкция
- Зарядное устройство

Эксплуатация и управление

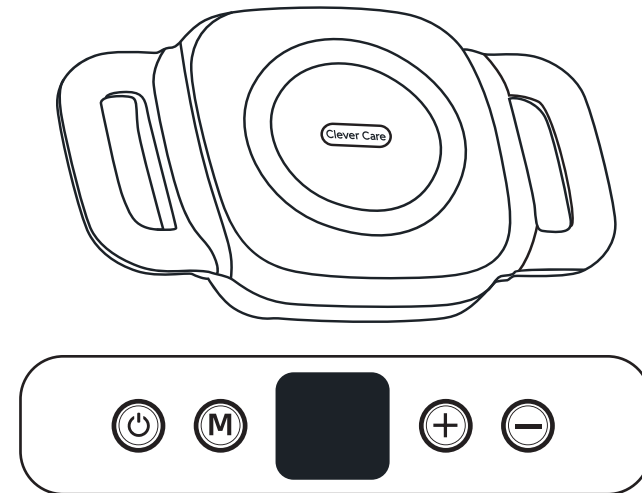

1. Нажмите и удерживайте пару секунд кнопку **«Вкл/Выкл»**.




2. Коротким нажатием на кнопку **«M»** выберите один из 9 режимов массажа.



3. Коротким нажатием на кнопку **«+»** увеличьте скорость массажа. Всего 50 уровней скорости массажа.



4. Коротким нажатием на кнопку **«—»** уменьшите скорость массажа.

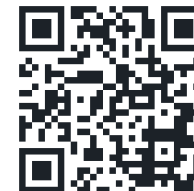


clevercare.ru

Модель Galaxy 6 heads · Артикул CC-G6H

При зарядке устройства напряжение 5V-1A на выходе (максимальная мощность на измеряемом выходе составляет менее 15 W). Во время зарядки индикатор на экране мигает, когда на экране высвечивается «00°», массажер полностью заряжен.

Типы насадок подойдут для каждой части тела


Шарики из EVA подходит для крупных групп мышц.

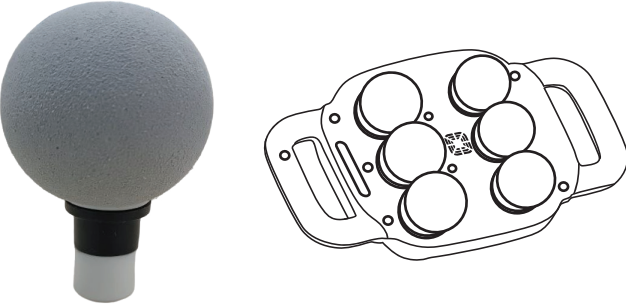

Закруглённая насадка для рук, талии, спины, ягодиц, икр.



Плоская насадка с акупунктурными точками для антицеллюлитного массажа бедер, ног, талии.

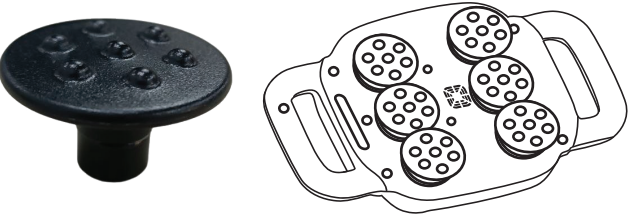

Меры предосторожности

- Никогда не используйте массажер, если Вы с кардиостимулятором, дефибриллятором и центральным венозным катетером, введенным через периферическую вену.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки. Детям до 6 лет запрещается использовать продукт в целях массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
- Во время беременности и кормления грудью избегайте использование данного массажера или используйте его после консультации с врачом .
- Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
- Не используйте массажер во время сна.
- Используйте массажер только в сухих помещениях.
- Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!

Хранение и уход за массажером

- Перед проведением действий по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуем заряжать продукт каждые полгода, чтобы не повредился аккумулятор.
- Для очищения массажера от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания.
- После применения моющего средства, удалите его следы с поверхности массажера.
- Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.
- Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства.



clevercare.ru



t.me/clevercare_beauty



vk.com/clevercare

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.