


Управление массажной подушкой

- **Кнопка вкл./выкл.:** одним нажатием включите/выключите массажер, устройство начнет работать автоматически. После окончания использования подушки, выключите её и выньте адаптер из адаптера матраса.
- **Кнопка направления движения массажных роликов:** одним нажатием выберите направление движения роликов.
- **Кнопка регулировки скорости движения роликов:** одним нажатием выберите **1** из **3** режимов скорости движения массажных роликов.
- **Кнопка нагрева:** одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.
- **Кнопка энергосберегающего режима:** однократно нажав на эту кнопку, включится/выключится энергосберегающий режим.
- **Кнопка «умного» режима:** нажмите на кнопку и выберите **1** из **3** предустановленных режимов.

Управление массажером для ног

- **Кнопка вкл./выкл.:** одним нажатием включите/выключите массажер для ног, устройство начнет работать автоматически (сеанс продлится 15 минут и после выключится автоматически). После окончания использования устройства, выключите его и выньте адаптер из адаптера матраса.
- **Кнопка направления движения массажных роликов:** одним нажатием выберите направление движения роликов.
- **Кнопка регулировки скорости движения роликов:** одним нажатием выберите **1** из **3** режимов скорости движения массажных роликов.
- **Кнопка функции нагрева:** одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.

Управление массажным матрасом с помощью пульта

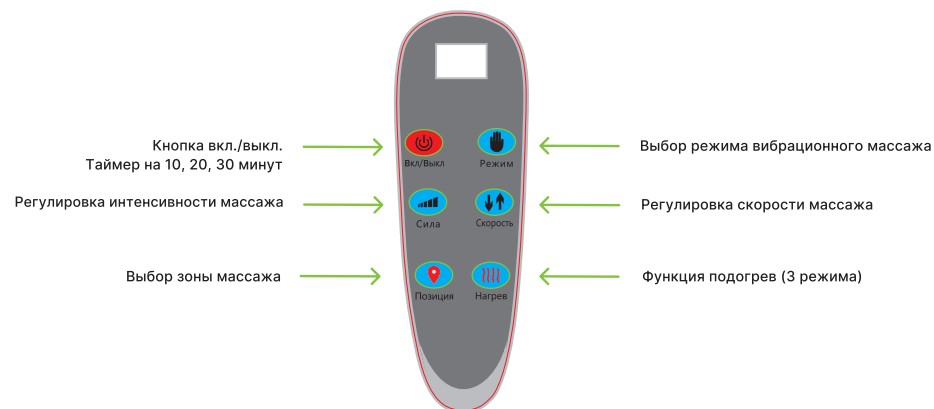

- **Кнопка «Вкл./Выкл.»:** однократным нажатием включите матрас, нажав на кнопку ещё раз, Вы сможете выбрать сеанс массажа продолжительностью **10/20/30 минут**. Когда на экране пульта высвечивается знак **«OF»**, устройство выключено.
- **Кнопка «Режим»:** одним нажатием на эту кнопку можно выбрать режим вибрации массажа всего тела. Всего **9 различных режимов массажа** — **«F1» – «F8» + «AU»**.
- **Кнопка «Сила»:** нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрационного массажа. Вам доступны **9 режимов** — **«S1» – «S9»**.
- **Кнопка «Скорость»:** однократно нажмите на эту кнопку, чтобы ускорить или замедлить частоту вибрационного массажа, в настройках устройства представлены **9 режимов скорости** — **«L1» – «L9»**.
- **Кнопка «Позиция»:** данная кнопка даёт возможность выбрать определенную зону массажа, а именно **«P1»** — плечи, **«P2»** — лопатки, **«P3»** — поясница, **«P4»** — ноги.
- **Кнопка «Нагрев»:** нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нагрева массажного матраса. В устройстве представлены **3 режима нагрева** — **«H1» – «H3»**, режим **«H0»** отключает функцию нагрева спины массажного матраса.

МАТРАС МАССАЖНЫЙ С МАССАЖЕРОМ НОГ

FULL BODY

URBANFIT
Clever Care

Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare

Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Матрас массажный с массажером ног Urbanfit CleverCare Full Body — это электрический массажер с дополнительным массажером ног и шеи, который помогает улучшить общее состояние организма и избавиться от усталости.

Меры предосторожности

- Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не используйте массажер во время сна.
- После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом.
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

Комплектация

- Массажный матрас, подушка с массажными роликами для шеи, подушка с ароматерапией, массажер для ног, пневматическая подушка для поясницы, пульт, инструкция, адаптер питания.

Уход и хранение

- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, свернуть матрас и хранить его в чистом сухом месте.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете.

Технические характеристики

- Тип массажера: роликовый, вибрационный
- Длительность сеанса: таймер 10/20/30 минут
- Количество режимов: 40
- Питание: от сети, 12v, 2.5A
- Мощность: 30 Вт
- Ширина матраса: 50 см
- Длина матраса: 170 см

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.




urbanfit.pro

Модель Full Body, коричневый · Артикул CC-101FB



vk.com/urbanfit_pro

Схема продукта

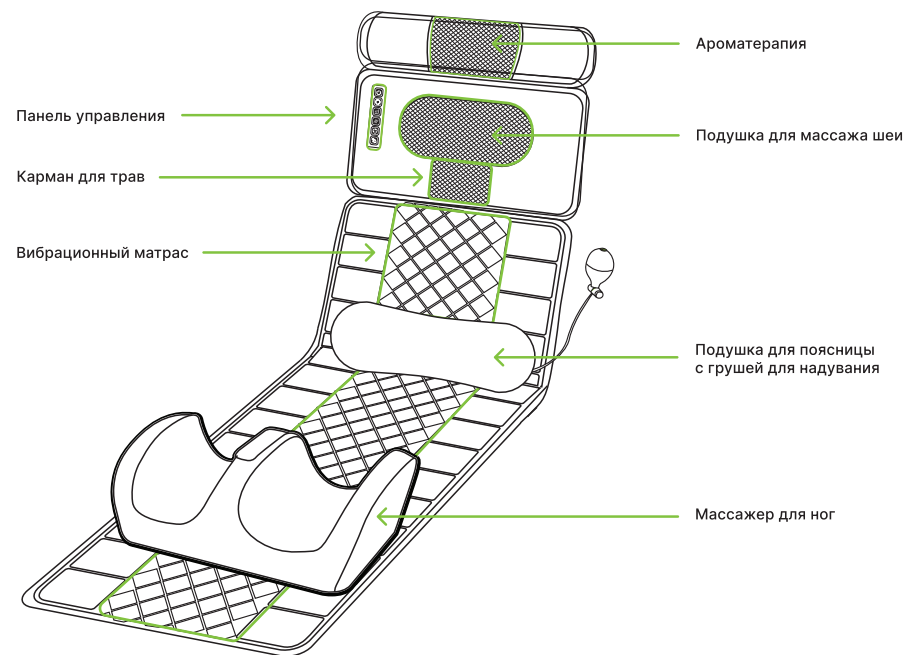


Эксплуатация и управление

Положите массажный матрас на диван, кровать или другую плоскую поверхность, надежно вставьте головку DC адаптера питания и головку DC массажного матраса, вилку питания 220 В воткните в розетку, на пульте высветится «OF», что указывает на то, что массажный матрас включен и готов к работе.

Использование пневматической подушки для поясницы

Частым сжатием груши, надуйте подушку до нужного Вам состояния. Чтобы сдуть подушку, нажмите кнопку выпуска воздуха.

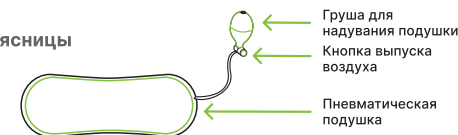

Панель управления на подушке для массажа шеи



Панель управления на массажере для ног

