

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И ПЛЕЧ

NECK PLEASURE

URBANFIT
Clever Care

Благодарим Вас за приобретение продукции Urbanfit CleverCare



Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Массажер для шеи и плеч **Neck Pleasure** и эффектом «свободных рук» представляет собой конструкцию в виде «руки» из 4 массажных головок и 2-х специальных роликов в нижней части механизма, движение которого максимально точно имитирует ручной массаж. Встроенная функция прогрева деликатно разогревает мышцы для максимального расслабления. Поможет быстрее и эффективнее снять напряжение в шее.

Технические характеристики


- Тип массажера: шиацу
- Автоматическое отключение: 10 минут
- Продолжительность заряда продукта: около 3 часов
- Аккумулятор: 1500 MAh
- Номинальное напряжение: 5 V
- Мощность: 10 Вт
- Вес массажера: 1,3 кг

Эксплуатация и управление

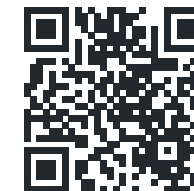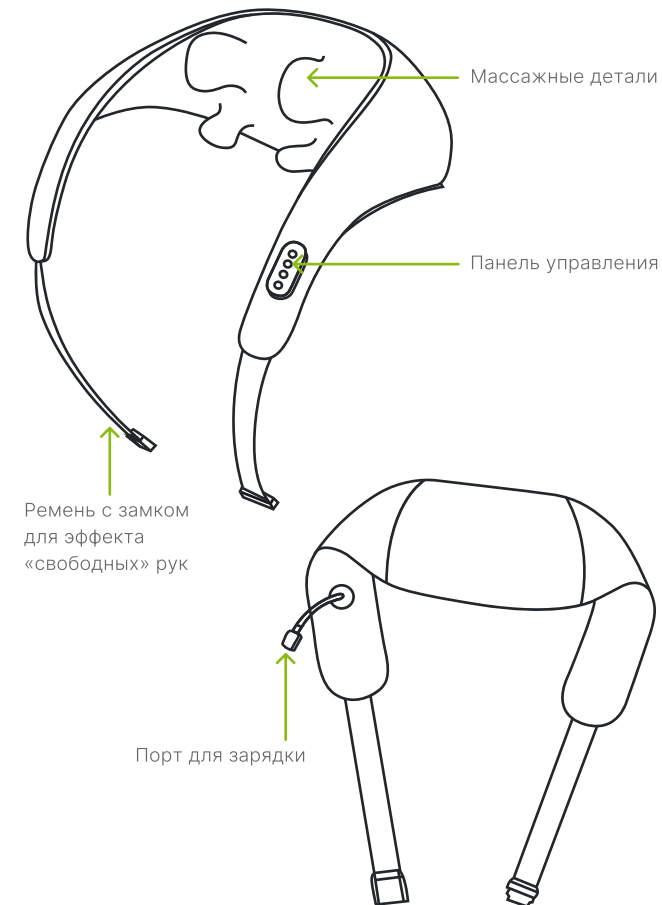

urbanfit.pro

Модель Neck Pleasure · Артикул CC-007NP

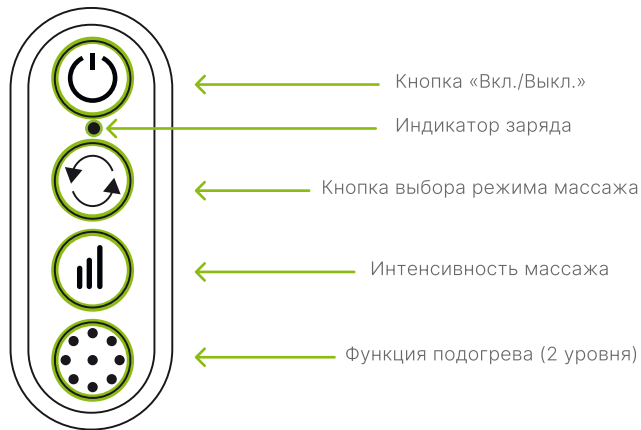

1. Долгим нажатием на кнопку **«Вкл./Выкл.»** включите массажер.



2. Коротким нажатием выберите подходящий режим массажа.



3. Коротким нажатием выберите интенсивность массажа. Всего **3 уровня интенсивности**.



4. Коротким нажатием на кнопку включите режим подогрева, выберите **1 из 2 уровней подогрева** или выключите эту функцию.

Меры предосторожности


1. Никогда не используйте массажер во время вождения.
2. Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер в качестве игрушки.
3. Не рекомендуется использовать массажер после операций в области плеч, шеи, не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы и опухоли.
4. Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкость не попадала на переключатели и кнопки массажера.
5. Устройство следует использовать с осторожностью при следующих состояниях: онкологические заболевания, остеопороз, высокая температура, нарушение сознания, пациенты с эритематозной эпилепсией, злокачественные опухоли, активный туберкулез, тяжелая сердечная дисфункция, пациентам с электронными устройствами, нарушениями свертываемости крови или склонностью к кровотечениям, беременным женщинам.
6. Не оставляйте работающий массажер под подушками, одеялами и т.п.
7. Не используйте массажер во время сна.
8. Используйте массажер только в сухих помещениях.
9. Не используйте устройство в ванной комнате, душе, бассейне, сауне и вне закрытых помещений..
10. Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя!
11. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

Хранение и уход за массажером

1. Перед проведением действий по уходу за массажером убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
2. Если массажер не используется долгое время, рекомендуем заряжать продукт каждые полгода, чтобы не повредился аккумулятор.
3. Для очищения массажера от загрязнений используйте мягкую ткань или губку, слегка смоченную в мягком моющем средстве, затем дождитесь его полного высыхания.
4. После применения моющего средства, удалите его следы с поверхности массажера.
5. Храните массажер в сухом, защищенном от пыли помещении вдали от источников тепла.
6. Не погружайте массажер в воду и не используйте для его очистки абразивные или агрессивные чистящие средства.

URBANFIT

Clever Care

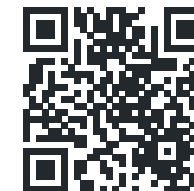

urbanfit.pro

5. При зарядке устройства запрещается пользоваться массажером! Это может привести к его поломке.

6. Когда массажер разряжен, индикатор будет гореть красным цветом, когда массажер заряжен, индикатор будет гореть зелёным цветом.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



t.me/urbanfit_pro



vk.com/urbanfit_pro