


Массажный матрас Фокус с массажером для ног

Инструкция по эксплуатации

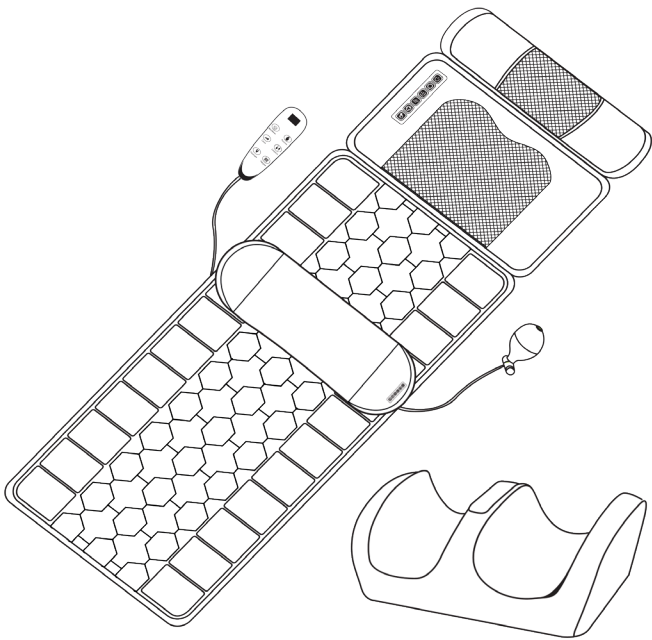

URBANFIT
Clever Care

Массажный матрас Фокус с массажером для ног URBANFIT CLEVER CARE

Благодарим Вас за приобретение продукции URBANFIT CLEVER CARE. Прежде чем начать использовать массажер, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и следуйте ей. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить его срок службы.

Массажный матрас Фокус с массажером для ног URBANFIT CLEVER CARE - идеальное решение для массажа дома. Максимальный комфорт от массажа создается в положении лежа, когда мышцы абсолютно расслаблены и находятся в состоянии покоя. Матрас выдерживает до 150kg. Электрический матрас с подогревом оснащен множествами режимами, с помощью которых, Вы можете собрать идеальную комбинацию для массажа. В целом, это массажер 5в1 для каждой части тела: для шеи, плеч, ног, спины и поясницы. Его уникальность заключается в том, что каждую массажную часть можно использовать, как вместе, так и по отдельности.


Технические характеристики

- Тип массажера: роликовый, вибрационный
- Количество режимов массажа: 57
- Длительность сеанса: таймер 10/20/30 минут
- Питание: от сети, 12v
- Мощность, Вт: 36

Комплектация: Массажный матрас, подушка с массажными роликами для шеи, подушка с магнитотерапией, массажер для ног, роликовая подушка для поясницы, пульт, инструкция, адаптер питания

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Схема продукта

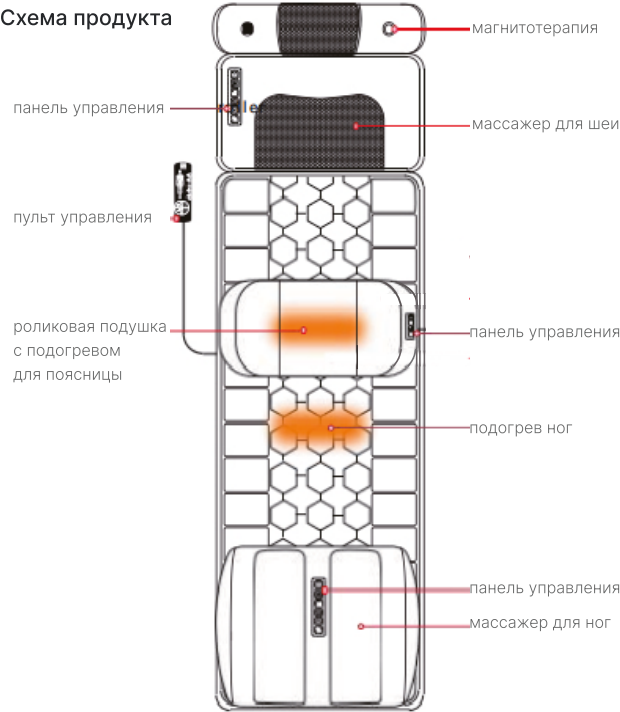

Эксплуатация и управление

- Кнопка вкл./выкл.
- Смена направления движения массажных роликов
- Регулировка скорости движения роликов
- Функция подогрева
- Энергосберегающий режим
- Кнопка "умного" режима

Модель Фокус · Артикул CC-558FF



urbanfit.pro

Артикул CC-558FF



vk.com/urbanfit_pro



t.me/urbanfit_pro

Управление массажной подушкой

1. Кнопка вкл./выкл.: одним нажатием включите/выключите массажер, устройство начнет работать автоматически. После окончания использования подушки, выключите её и выньте адаптер из адаптера матраса.
2. Кнопка направления движения массажных роликов: одним нажатием выберите направление движения роликов.
3. Кнопка регулировки скорости движения роликов: одним нажатием выберите режим скорости движения массажных роликов.
4. Кнопка нагрева: одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.
5. Кнопка энергосберегающего режима: однократно нажав на эту кнопку, включится/выключится энергосберегающий режим.
6. Кнопка “умного” режима: нажмите на кнопку и выберите 1 из 3 предустановленных режимов.

Панель управления на массажере для ног



Кнопка вкл./выкл.

Смена направления движения массажных роликов

Регулировка скорости движения роликов

Функция подогрева

Панель управления на массажере для ног

1. Кнопка вкл./выкл.: одним нажатием включите/выключите массажер для ног. После окончания использования устройства, выключите его и выньте адаптер из адаптера матраса.
2. Кнопка направления движения массажных роликов: одним нажатием выберите направление движения роликов.
3. Кнопка регулировки скорости движения роликов: одним нажатием выберите режим скорости движения массажных роликов.
4. Кнопка функции нагрева: одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.

Пульт

Кнопка вкл./выкл. / Таймер 10,20,30 минут

Регулировка интенсивности массажа

Выбор зоны массажа



Выбор режима вибрационного массажа

Регулировка скорости массажа

Функция подогрева (3 режима)

Положите массажный матрас на диван, кровать или другую плоскую поверхность, надежно вставьте головку DC адаптера питания и головку DC массажного матраса, вилку питания воткните в розетку, массажный матрас включен и готов к работе.

Управление массажным матрасом с помощью пульта

1. Кнопка вкл./выкл.: однократным нажатием включите матрас, нажав на кнопку ещё раз, Вы сможете выбрать сеанс массажа продолжительностью 10/20/30 минут.
2. Кнопка “режим”: одним нажатием на эту кнопку можно выбрать режим вибрации массажа всего тела. Всего 9 различных режимов массажа - "F1" - "F8" + "AU".
3. Кнопка “сила”: нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрационного массажа. Вам доступны 9 режимов.
4. Кнопка “скорость”: однократно нажмите на эту кнопку, чтобы ускорить или замедлить частоту вибрационного массажа, в настройках устройства представлены 9 режимов скорости.
5. Кнопка “позиция”: данная кнопка даёт возможность выбрать определенную зону массажа, а именно «P1»-плечи,«P2»-поясница,«P3»-бока,«P4»-бедра,«P5»-плечи+бока,«P6»-поясница+бедра,«P7»-плечи+бедра,«P8»-поясница+бока,«P9»-бока+бедра.
6. Кнопка “нагрев”: нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нагрева массажного матраса. В устройстве представлены 3 режима нагрева - «E1» - «E3»:«E1»-20-30°C,«E2»-30-40°C,«E3»-40-50°C.

Управление массажной подушкой



Кнопка вкл./выкл.

Смена направления движения массажных роликов

Регулировка скорости движения роликов

Функция подогрева

Энергосберегающий режим

Кнопка "умного" режима

1. Кнопка вкл./выкл.: одним нажатием включите/выключите подушку, устройство начнет работать автоматически. После окончания использования подушки, выключите её и выньте адаптер из адаптера матраса.
2. Кнопка направления движения массажных роликов: одним нажатием выберите направление движения роликов.
3. Кнопка регулировки скорости движения роликов: одним нажатием выберите режим скорости движения массажных роликов.
4. Кнопка нагрева: одним нажатием включите/выключите функцию нагрева.
5. Кнопка энергосберегающего режима: однократно нажав на эту кнопку, включится/выключится энергосберегающий режим.
6. Кнопка “умного” режима: нажмите на кнопку и выберите 1 из 3 предустановленных режимов.

Меры предосторожности

1. Не подключайте массажер к питанию влажными руками.
2. Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
3. Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
4. Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
5. Не используйте массажер во время сна.
6. После еды в течение 30 минут нельзя пользоваться массажным аппаратом
7. Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
8. Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
9. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.

Уход и хранение

1. Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
2. Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
3. Если массажер не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока, свернуть матрас и хранить его в чистом сухом месте.
4. Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
5. Используйте оборудование при свете.